

层析 C 线 (Binding Fc)

Cat.No: DTT0299

产品描述

层析 C 线是一种具有高 IgG 亲和力的蛋白复合体, 采用框架表面展示技术, 将结合 IgG 的小肽辐射朝外, 均匀展示在框架表面, 全方位结合 IgG。本产品具有广谱的抗体亲和力, 与兔、鼠、驴、羊来源 IgG 的 Fc 均具有高亲和力。本产品还具有良好的稳定性, 能够在 pH4.0 ~ 9.0 范围内保持活性。层析 C 线适用于非独立 C 线。


产品优势

- 批间一致: 工艺稳定可靠, 批次间 CV \leq 5%。
- 用量更低: 支持更高稀释倍数, 降低使用成本。
- 广谱兼容: 兼容多种来源 IgG Fc, 简化库存管理。
- 储存稳定: 在 pH 4.0–9.0 条件下保持稳定。
- 规模供应: 规模化生产成熟, 交付稳定可靠。

产品详情

名称	层析 C 线 (Binding Fc)
纯度	95% (SDS PAGE)
储存液	Tris-NaCl with 0.1% Proclin300 (pH 7.5)
稀释比例	LFIA Control line from 0.2 mg/ml
应用	侧流免疫层析 (LFIA)
储存方式	2 ~ 8°C 保存 6 个月, -20°C \pm 5°C 冷冻保存 1 年。

交叉反应性

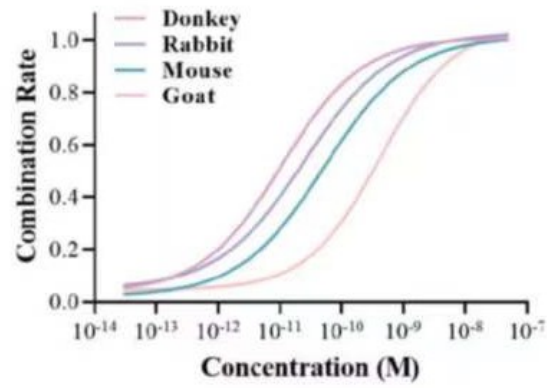

兔、鼠、驴、羊

Thank you for choosing Detai Biological. We are dedicated to serving you!

For Research Use Only